



## Вакумный очиститель пор и кожи


Skin Cleaner 7.0



medica+

JAPAN TECHNOLOGY



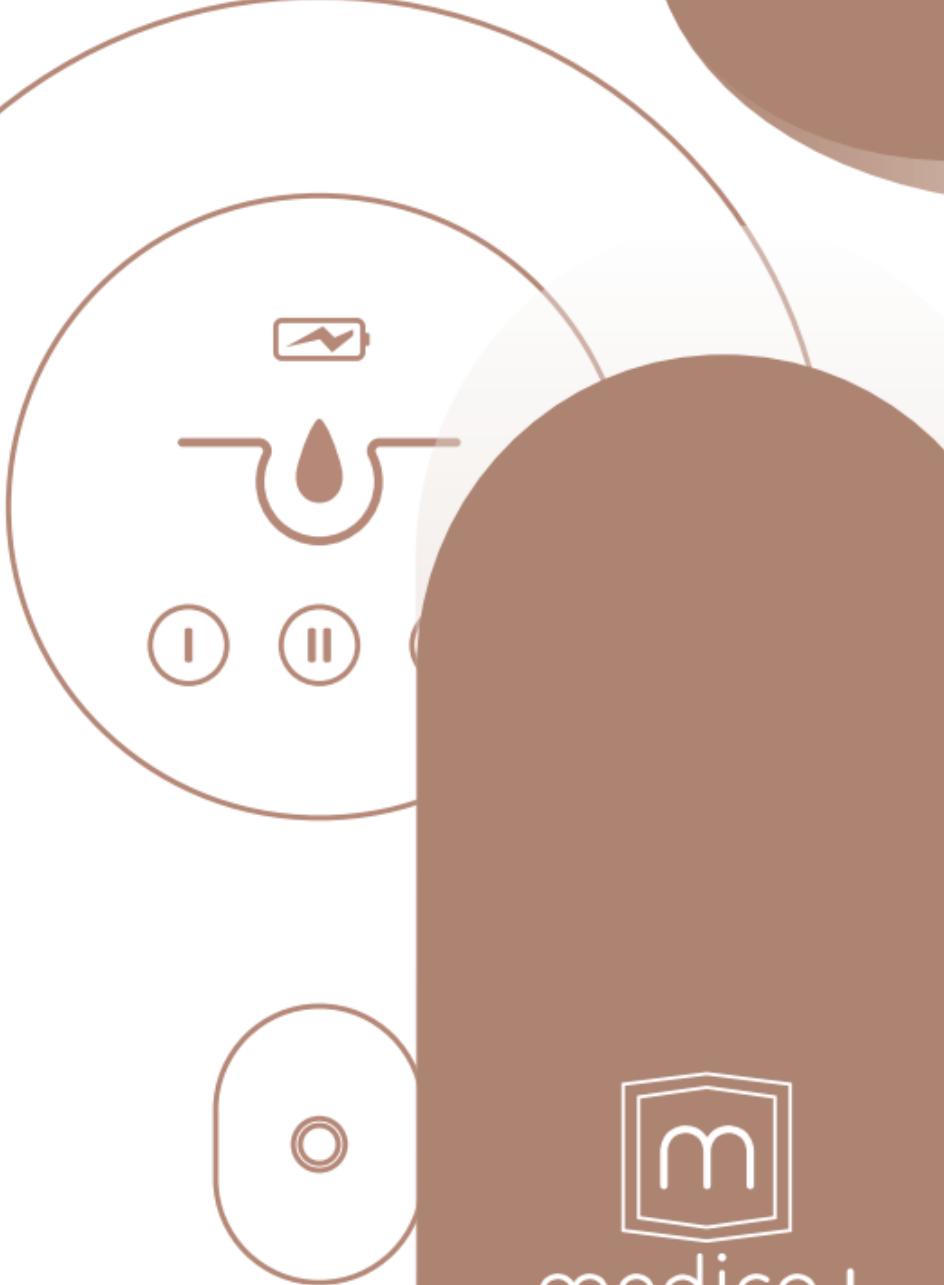

medica+

JAPAN TECHNOLOGY



# **Вакуумный очиститель кожи и пор**

**Skin Cleaner 7.0**

*Спасибо за покупку нашего продукта.*

*Внимательно прочтите инструкцию перед  
тем, как использовать прибор.*

*Результаты могут быть различными в  
зависимости от надлежащей  
подготовки пор.*

## **Содержание**

---

Представление прибора .....	1
Подготовка лица .....	1
Инструкции .....	2
Функции .....	3
Параметры продукта .....	3
Дермабразия и отшелушивание ...	4
Очищение пор .....	4
Уменьшение мелких морщин ....	4
Внимание .....	5-6
Разновидность присосок .....	7-8

# **Представление прибора**

Устройство вакуумного отсоса для удаления черных точек. Быстро удаляет нежелательную кожную смазку, накопленную остаточную грязь и отмершие кожные клетки.

## **Подготовка лица**

1. Нанесите очищающее средство, которое лучше всего подходит для вашего типа кожи. Кремообразное средство хорошо подходит для сухой или чувствительной кожи.  
Рассмотрим гелевую формулу для комбинированной или жирной кожи.
2. Намочите лицо теплой (не холодной и не горячей) водой.
3. Нанесите очищающее средство нежными круговыми движениями. Масируйте лицо в течении 1 минуты.
4. Тщательно смойте средство теплой водой.
5. Промойте ткань теплой водой.
6. Держите ткань на лице, чтобы выпарить поры, пока ткань остывает. Повторите эту процедуру 3-4 раза.
7. После не трите лицо.

# Инструкции

Продукт лучше всего использовать после соответствующих инструкций по подготовке лица.

1. Выбрать всасывающий наконечник в соответствии с желаемыми потребностями.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы начать, а затем нажмите выбор режима, всего три режима.
3. Включение по умолчанию средний режим (нейтральная кожа); затем нажмите кнопку питания, чтобы переключиться на режим высокого напряжения iii (сухая кожа);

Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы переключиться на низкую температуру i (жирная кожа).

Всего 3 режима на выбор в зависимости от типа кожи, (низкий, средний и высокий). Точечный тест на руке для проверки перед нанесением на лицо.

4. Удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.
5. Электрический индикатор мигает во время зарядки и остановится когда зарядится.


# Функции

Индикатор зарядки

Индикатор передачи

Клавиша ВКЛ/ВЫКЛ  
(Нажмите клавишу  
чтобы включить,  
затем нажмите  
другую передачу,  
удерживайте до  
выключения)

USB зарядное устройство

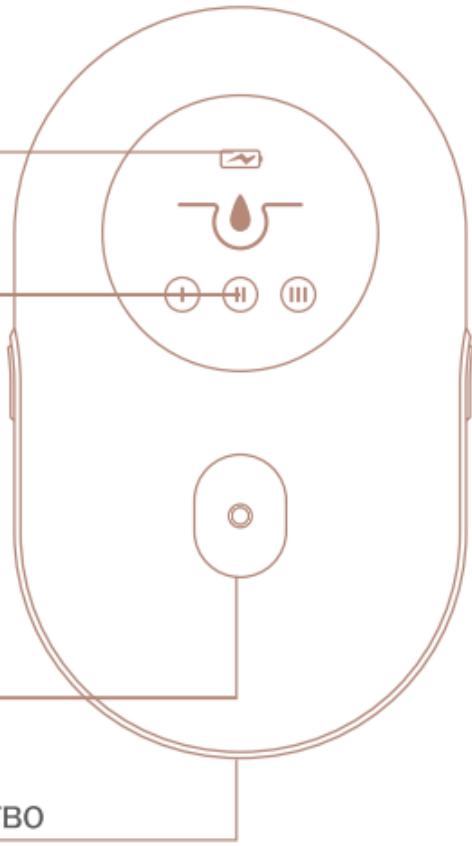

# Параметры

Емкость батареи: 500 мАч

Напряжение: 5 В

Время работы: 120 минут

Мощность: 1.6 Вт

Время зарядки: ≈2 часов

Ток: 450 мА

# **Дермабразия и отшелушивание**

1. Чистая и сухая кожа лица;
2. Замените рабочую присоску на микрокристаллическую или большую круглое отверстие;
  - A. Поместите рабочую всасывающую головку в область нижней челюсти и двигайтесь снизу вверх.
  - B. Поместите рабочую всасывающую головку в область щеки и двигайтесь изнутри наружу.
  - C. Поместите рабочую всасывающую головку в область лба и двигайтесь от середины к обеим сторонам.
  - D. Поместите рабочую всасывающую головку в область Т зоны и двигайтесь от снизу вверх.

## **Очищение пор**

1. Чистая и сухая кожа лица:
2. Воспользоваться желаемым всасывающим наконечником.
3. Для удаления угрей и прыщей, скользите медленно в одном горизонтальном направление.
4. Не засасывайте одно и то же место более чем на 3 секунды.

# **Уменьшение мелких морщин**

1. Чистая и сухая кожа лица;
2. Заменить эллиптическую рабочую всасывающую головку;
3. Поместите рабочую всасывающую головку в уголки глаза, носа, губ и т. д. и быстро поднимайтесь вверх.

Действуют на нижележащий слой кожи, повышают эластичность кожи, предотвращает появление морщин.

## **Внимание**

1. Этот продукт не имеет водонепроницаемой функции. Пожалуйста, протрите прибор и руки от влаги или других жидкостей перед использованием, предотвратив попадание воды или других жидкостей в фюзеляж.
2. Не использовать не подходящие насадки для прибора.

3. Функция дермабразии и отшелушивания. Рекомендуется использовать для сухой и жирной кожи один раз в неделю.

Для нормальной кожи можно использовать дважды в неделю. Не более 5 минут на каждое использование. Это зависит от состояния кожи.

4. Пожалуйста, не давите на рабочую всасывающую головку сильно, потому что инструмент будет производить сильное тяговое усилие.
5. Не продолжайте использовать на одном и том же месте, иначе это может вызвать покраснение кожи. Если это случилось, пожалуйста, приостановите использование.
6. После очистки кожи прибором, может возникнуть легкое покраснение, которое пройдет в течении нескольких минут.
7. Этот продукт не подходит для проведения операций, не подходит для лиц с физическими недостатками, психическими отклонениями.



medica+

# Разновидность

## Маленькое круглое отверстие рабочей присоски



Маленький отсос, используется для отсасывания угрей. Для тонкой, нежной и чувствительной кожи. Всасывание не слишком сильное.

## Присоска со средним круглым отверстием



Высокое всасывание, используется для отсасывания угрей, прыщей. С излишним сальным блеском, не следует использовать насадку на одном и том же месте в течение долгого времени.

## Большое круглое отверстие рабочий присоски



Высокое всасывание, используется для всасывания угрей. Не зацикливайтесь на одном и том же месте в течении долгого времени, во избежание травм кожи. Используйте в насадку снизу вверх, медленно двигайтесь от подбородка вверх.

## **Микрокристаллический рабочая присоска**

---



Мелкие кристаллы могут мягко удалить стареющий слой кожи, сделав кожу нежной.

## **Присоска с эллиптическим отверстием**

---



В основном используется для удаления мелких морщин. Повышает кровообращение, тем самым и приводит к замедлению старения и повышает эластичность кожи.

