

ENG / UA/ PL



**Heating and Cooling Attachment
for MassHand Pro 2X**

medica+ 
JAPAN TECHNOLOGY

ENG



Instruction

**Heating and Cooling
Attachment
for MassHand Pro 2X**

Content

Safety Instructions	01-02
Description	02-03
Heating Button.....	03
Cooling Button.....	04
LED Indicators	04
Warranty Terms.....	05
Technical Specifications	06

Dear Customer,
Thank you for choosing MEDICA+ products.
Please read this instruction manual carefully before using the device.

Safety Instructions

1. The attachment is intended exclusively for thermal heating and cooling massage of muscle tissues and fascia. Do not use the attachment for any other purposes. Improper use may result in device damage or personal injury.
2. Do not change the attachment while the massager is in operation.
3. Do not wash or immerse the attachment in water or any other liquids. The attachment contains electronic components and a built-in battery; contact with liquids may cause a short circuit, electric shock, or permanent damage to the device. For cleaning, use a dry or slightly damp cloth, avoiding direct contact of water with electronic components.
4. Keep the device and attachment out of reach of children to prevent accidental activation, burns, or injury.


5. Always monitor a comfortable temperature and massage intensity. Do not apply heat or cooling to the same area of skin for an extended period. Please note that the attachment has maximum operating time limits: up to 5 minutes for cooling and up to 10 minutes for heating, after which automatic shut-off will activate.

Description

The Heating and Cooling Attachment for MEDICA+ MassHand Pro 2X (sold separately) is an additional accessory that expands the functional capabilities of the device. It is fully compatible with this model and can be easily installed in place of the standard attachments.

The attachment is equipped with both heating and cooling functions, allowing you to combine percussion massage with thermal therapy. The heating mode promotes deeper muscle relaxation and reduces the sensation of tension, while the cooling mode helps tone tissues after physical activity.

Suitable for use on various areas of the body in accordance with the massager operating guidelines.

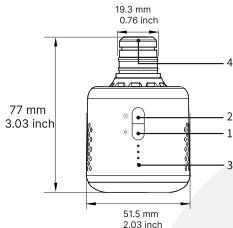

1. Heating Button
2. Cooling Button
3. Indicator Lights
4. USB Type-C Charging Port

Heating Button

1. Turning on heating: Press and hold the button for 1.5 seconds.
2. Adjusting heating levels: Short presses switch between four intensity levels.
3. Turning off heating: Press and hold the button for 1.5 seconds.

Cooling Button

1. Turning on cooling: Press and hold the button for 1.5 seconds.
2. Adjusting cooling levels: Short presses switch between four intensity levels.
3. Turning off cooling: Press and hold any button (heating/cooling) for 1.5 seconds.

LED Indicators

- Charging: Four red LEDs flash during charging. A steady blue light indicates a full charge.
- Cooling levels: Each level corresponds to a specific blue LED.
- Heating levels: Each level corresponds to a specific red LED.
- Low battery: The first LED flashes red.

Warranty Terms

Dear Customers,

Please keep this instruction manual properly in order to use the warranty certificate. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty has been purchased) in the event of a malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modification.
3. If parts not supplied or approved by our company have been used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to these terms, maintenance services provided outside the warranty period are subject to additional charges.

Parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Technical Specifications

Display: LED

Cooling Temperature: 8–14°C (4 levels)

Heating Temperature: 39–45°C (4 levels)

Temperature Accuracy: $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Battery: USB Type-C 5V=1A, 700 mAh capacity

Operating Time: up to 30 minutes (cooling) or 100 minutes (heating)

Auto Shut-Off: 5 minutes (cooling), 10 minutes (heating)

UA



**Посібник
користувача**

**Насадка тепло/холод для
масажера MEDICA +
MassHand Pro 2X**

Зміст

Інструкція з безпеки	01-02
Опис.....	02-03
Кнопка нагрівання	04
Кнопка охолодження	04
Світлодіодні індикатори	05
Гарантійні умови.....	06
Технічні характеристики	07

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію MEDICA+.

Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Інструкція з безпеки

1. Насадка призначена виключно для термального та охолоджуючого масажу м'язових тканин та фасцій. Не використовуйте насадку для інших цілей. Використання не за призначенням може призвести до пошкодження пристрою або травм.
2. Не змінюйте насадку під час роботи масажера.
3. Не мийте та не занурюйте насадку у воду або будь-які інші рідини. Насадка містить електронні компоненти та вбудовану батарею, контакт з рідиною може спричинити коротке замикання, електричний удар або повне пошкодження пристрою. Для очищення використовуйте суху або трохи вологою серветку, уникаючи прямого попадання води на електроніку.
4. Тримайте пристрій та насадку подалі від дітей, щоб уникнути випадкового включення, опіків або травм.


5. Завжди слідкуйте за комфортною температурою та інтенсивністю масажу. Не використовуйте нагрів або охолодження на одній ділянці шкіри протягом тривалого часу. Пам'ятайте, що насадка має обмеження по максимальному часу роботи: до 5 хвилин для охолодження та до 10 хвилин для нагріву, після чого спрацьовує автоматичне вимкнення.

Опис

Насадка тепло/холод для масажера MEDICA+ MassHand Pro 2X (продається окремо) — це додатковий аксесуар, що розширює функціональні можливості пристрою. Вона повністю сумісна з даною моделлю та легко встановлюється замість стандартних насадок.

Насадка оснащена функціями нагріву та охолодження, що дозволяє поєднувати перкусійний масаж із термовпливом. Тепловий режим сприяє глибшому розслабленню м'язів і зменшенню відчуття напруження, тоді як режим охолодження допомагає тонізувати тканини після фізичного навантаження.

Підходить для використання на різних ділянках тіла відповідно до рекомендацій з експлуатації масажера.

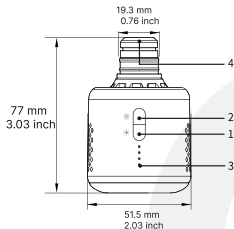

1. Кнопка нагрівання
2. Кнопка охолодження
3. Світлові індикатори
4. USB Type-C порт для зарядки.

Кнопка нагрівання

1. Увімкнення нагріву: утримуйте кнопку протягом 1,5 секунд.
2. Регулювання рівнів нагріву: короткими натисканнями перемикайте між чотирма рівнями інтенсивності.
3. Вимкнення нагріву: утримуйте кнопку протягом 1,5 секунд.

Кнопка охолодження

1. Увімкнення охолодження: утримуйте кнопку протягом 1,5 секунд.
2. Регулювання рівнів охолодження: короткими натисканнями перемикайте між чотирма рівнями інтенсивності.
3. Вимкнення охолодження: утримуйте будь-яку кнопку (нагрівання/охолодження) протягом 1,5 секунд.

Світлодіодні індикатори

- Заряджання: чотири червоні LED миготять під час заряджання. Синє постійне світло означає повну зарядку.
- Рівні охолодження: кожен рівень відповідає певному синьому LED.
- Рівні нагріву: кожен рівень відповідає певному червоному LED.
- Низький заряд батареї: перший LED миготить червоним.

Гарантійні умови

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Технічні характеристики

Дисплей: LED

Температура охолодження: 8–14°C (4 рівні)

Температура нагріву: 39–45°C (4 рівні)

Точність температури: $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Батарея: USB Type-C 5V=1A, ємність 700 mAh

Час роботи: до 30 хв охолодження або 100 хв нагріву

Автовимкнення: 5 хв охолодження, 10 хв нагріву

PL



Instrukcja obsługi

**Nasadka ciepło/zimno do
masażera MEDICA +
MassHand Pro 2X**

Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa.....	01-02
Opis	02-03
Przycisk ogrzewania.....	03
Przycisk chłodzenia.....	04
Wskaźniki LED	04
Warunki gwarancji	05
Dane techniczne.....	06

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za wybór produktów MEDICA+.

Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Nasadka jest przeznaczona wyłącznie do masażu termicznego i chłodzącego tkanek mięśniowych i powięzi. Nie używaj nasadki do innych celów. Użycie niezgodne z przeznaczeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.
2. Nie zmieniaj nasadki podczas pracy masażera.
3. Nie myj ani nie zanurzaj nasadki w wodzie lub innych płynach. Nasadka zawiera elementy elektroniczne i wbudowaną baterię, kontakt z płynem może spowodować zwarcie, porażenie prądem lub całkowite uszkodzenie urządzenia. Do czyszczenia używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki, unikając bezpośredniego kontaktu wody z elektroniką.
4. Trzymaj urządzenie i nasadkę z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego włączenia, oparzeń lub urazów.


6. Zawsze dbaj o komfortową temperaturę i intensywność masażu. Nie używaj funkcji ogrzewania lub chłodzenia na jednym obszarze skóry przez dłuższy czas. Pamiętaj, że nasadka ma ograniczenia dotyczące maksymalnego czasu pracy: do 5 minut dla chłodzenia i do 10 minut dla ogrzewania, po czym następuje automatyczne wyłączenie.

Opis

Nasadka ciepło/zimno do masażera MEDICA+ MassHand Pro 2X (sprzedawana osobno) to dodatkowe akcesorium, które rozszerza funkcjonalność urządzenia. Jest w pełni kompatybilna z tym modelem i łatwo się ją montuje zamiast standardowych nasadek.

Nasadka jest wyposażona w funkcje ogrzewania i chłodzenia, co pozwala łączyć masaż perkusyjny z działaniem termicznym. Tryb ogrzewania sprzyja głębszemu rozluźnieniu mięśni i zmniejszeniu uczucia napięcia, natomiast tryb chłodzenia pomaga tonizować tkanki po wysiłku fizycznym.

Nadaje się do stosowania na różnych obszarach ciała zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania masażera.

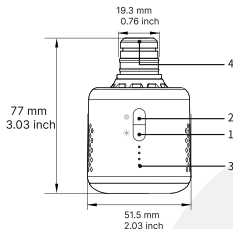

1. Przycisk ogrzewania
2. Przycisk chłodzenia
3. Wskaźniki świetlne
4. Port USB typu C do ładowania

Przycisk ogrzewania

1. Włączanie ogrzewania: przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.
2. Regulacja poziomów ogrzewania: krótkim naciśnięciem przełączaj między czterema poziomami intensywności.
3. Wyłączanie ogrzewania: przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.

Przycisk chłodzenia

1. Włączanie chłodzenia: przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy.
2. Regulacja poziomów chłodzenia: krótkie naciśnięcia pozwalają przełączać się między czterema poziomami intensywności.
3. Wyłączenie chłodzenia: przytrzymaj dowolny przycisk (ogrzewanie/chłodzenie) przez 1,5 sekundy.

Wskaźniki LED

- Ładowanie: cztery czerwone diody LED migają podczas ładowania. Niebieskie światło stałe oznacza pełne naładowanie.
- Poziomy chłodzenia: każdy poziom odpowiada określonej niebieskiej diodzie LED.
- Poziomy ogrzewania: każdy poziom odpowiada określonej czerwonej diodzie LED.
- Niski poziom naładowania baterii: pierwsza dioda LED miga na czerwono.

Warunki gwarancji

Szanowni Klienci!

Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji w celu skorzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje przez okres jednego roku od daty zakupu (lub przez okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia przedłużonej gwarancji) w przypadku awarii przy normalnych warunkach użytkowania.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli do urządzenia zostały zastosowane i użyte części, które nie należą do naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Zgodnie z warunkami, konserwacja techniczna świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Dane techniczne

Wyświetlacz: LED

Temperatura chłodzenia: 8–14°C (4 poziomy)

Temperatura ogrzewania: 39–45°C (4 poziomy)

Dokładność temperatury: $\pm 3^{\circ}\text{C}$

Bateria: USB Type-C 5V=1A, pojemność 700 mAh

Czas pracy: do 30 minut chłodzenia lub 100 minut ogrzewania

Automatyczne wyłączenie: 5 minut chłodzenia, 10 minut ogrzewania

